


O que inclui:

	Unidade de Terapia com recipiente coletor
	Curativo
	Estojo de transporte com alças ajustáveis
	Três pilhas AA
	Tiras adesivas

Aparência do curativo:

	O curativo deve estar enrugado e a espuma, comprimida.
	Se a espuma não estiver comprimida ou se a Unidade de Terapia emitir um alerta, consulte a página 2 — “Indicadores e Alertas” — para instruções.

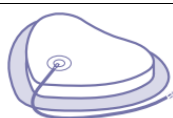

Assista ao vídeo (em inglês)

Como usar a Unidade de Terapia

	Mantenha a Unidade de Terapia ligada. Não é necessário trocar o curativo. A Unidade de Terapia desligará automaticamente após 7 dias. Nesse momento, remova o curativo e descarte-o, junto com a Unidade de Terapia, no lixo.
	Mantenha a Unidade de Terapia protegida e seca. Não deixe a Unidade de Terapia cair nem permita que a tubulação fique dobrada, torcida ou pinçada. Mantenha a Unidade de Terapia seca. Veja abaixo as orientações para banho leve.
	Você pode ou não notar líquido acumulando-se no recipiente coletor. Algumas incisões drenam mais do que outras. Algumas não apresentam drenagem. Se o recipiente coletor ficar completamente cheio, desligue a Unidade de Terapia e ligue para o setor de Parto e Nascimento pelo número 617- 414- 2000.
	Pilhas A Unidade de Terapia acompanha três pilhas AA. Se as pilhas acabarem, consulte “Indicadores e Alertas da Unidade de Terapia” na página 2 para substituí-las.
	Dormindo com a Unidade de Terapia Coloque o curativo e a bomba em um local onde a tubulação não fique dobrada, torcida ou pinçada. Mantenha a Unidade de Terapia próxima ao corpo para evitar que ela caia de uma mesa ou cama no chão.
	Tomando banho com a Unidade de Terapia Banho leve é permitido. Não tome banho de imersão. • Mantenha a Unidade de Terapia afastada de jatos de água diretos. [Você pode desligar a unidade e desconectar a tubulação, se desejar.] • Um pouco de água ou sabonete não afeta o curativo — é permitido enxaguar levemente. • Ao secar-se com toalha, tenha cuidado para não deslocar ou danificar o curativo.
	ATENÇÃO: se a Unidade de Terapia cair na banheira, no chuveiro ou na pia, desligue-a imediatamente (se estiver conectada a uma fonte elétrica) e desconecte-a do curativo. Em seguida, entre em contato com o setor de Parto e Nascimento pelo número 617- 414- 2000.

Indicadores e Alertas da Unidade de Terapia



Indicador de Atenção



Alarme Sonoro (silenciado)



Nível de Bateria

Tipo de Alerta	Como Corrigir
Alerta de Vazamento Um bip e uma luz amarela fixa. 	Para garantir a aplicação correta da Unidade de Terapia – pressione duas vezes o botão LIGA/DESLIGA: Uma luz = Melhor Duas luzes = Bom Três luzes = Marginal Se for “Marginal”: 1. Certifique-se de que o recipiente coletor esteja corretamente encaixado na Unidade de Terapia. 2. Verifique se os conectores da tubulação estão totalmente encaixados e travados. 3. Use o dedo para alisar eventuais dobras na camada adesiva. 4. Use as tiras adesivas (localizadas na embalagem do curativo) para ajudar a vedar vazamentos. 5. Pressione, lentamente e com firmeza, ao redor das bordas do curativo.
Alerta de Recipiente Cheio Dois bips e uma luz amarela fixa. 	Verifique o nível de líquido no recipiente coletor. 1. Se o recipiente não estiver cheio, verifique se há dobras ou pinçamento na tubulação. 2. Se o recipiente estiver cheio, desligue a Unidade de Terapia. 3. Ligue para o setor de Parto e Nascimento pelo número 617- 414- 2000.
Alerta de Bateria Fraca Um bip lento e uma luz amarela fixa. Crítico: Um bip repetido rapidamente, com volume crescente, e duas luzes amarelas fixas. 	Esta Unidade de Terapia acompanha três pilhas AA. Para substituir as pilhas: 1. Mantenha o botão pressionado por cinco segundos para desligar. 2. Pressione e empurre o painel na parte traseira da Unidade de Terapia para abrir. 3. Insira três pilhas AA (recomenda-se pilhas de lítio). 4. Pressione e empurre o painel para fechar. 5. Mantenha o botão pressionado por dois segundos para ligar.
Alerta de Erro de Sistema Um bip repetido rapidamente, com volume crescente, e duas luzes amarelas fixas. 	1. Mantenha o botão pressionado por cinco segundos para desligar. 2. Mantenha o botão pressionado por dois segundos para ligar novamente. 3. Se a terapia ainda não reiniciar, ligue para o setor de Parto e Nascimento pelo número 617- 414- 2000.
Ciclo de Vida do Dispositivo Expirado Três luzes indicam que o ciclo de vida chegou ao fim. Haverá um bip repetido por 15 segundos, e então a Unidade de Terapia desligará. 	Ligue para o setor de Parto e Nascimento pelo número 617- 414- 2000. Ciclo de vida = 192 horas (oito dias)